

IL NUOVO SISTEMA DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE

 **WHITE** | BEAUTY
PROFESSIONAL

— CON —
**WHITE
NOW**
mentadent.

WHITE | BEAUTY PROFESSIONAL

IL NUOVO SISTEMA DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE WHITE BEAUTY PROFESSIONAL PROPONE UNA LINEA PRODOTTI A BASE DI PEROSSIDO D'IDROGENO PER LO STUDIO E UNA LINEA DI DENTIFRICI E SPAZZOLINI WHITE NOW, PER UNA BUONA E CORRETTA IGIENE ORALE.



TRATTAMENTO MOTIVAZIONALE

White Beauty Professional MOTIVATIONAL KIT è studiato per motivare il paziente a effettuare lo sbiancamento dentale professionale, partendo da una corretta igiene orale, grazie all'utilizzo di una Mini Pen sbiancante e il dentifricio White Now.



TRATTAMENTO PROFESSIONALE IN STUDIO

White Beauty Professional MEDICAL WHITENING TREATMENT è il kit studiato per fornire al professionista tutti gli strumenti per effettuare lo sbiancamento professionale in studio.



TRATTAMENTO DOMICILIARE

White Beauty Professional BLUE LED HOME TREATMENT è il trattamento domiciliare pensato per i pazienti che vogliono mantenere a casa la tonalità del dente ottenuta dopo aver effettuato lo sbiancamento professionale in studio.



TRATTAMENTO MOTIVAZIONALE

MOTIVATIONAL KIT



White Beauty Professional MOTIVATIONAL KIT è studiato per motivare il paziente a effettuare lo sbiancamento dentale professionale, partendo da una corretta igiene orale, grazie all'utilizzo di una **Mini Pen sbiancante** e il **dentifricio White Now**.

Il kit contiene **10 Mini Pen White Beauty Professional** a base di Perossido d'Iidrogeno al 6% da consegnare ai pazienti con **10 dentifrici White Now** all'interno delle apposite bustine.


Cod. EE643 - Contenuto del Kit:

10 MINI PEN WHITE
BEAUTY PROFESSIONAL (1ML)

10 DENTIFRICI WHITE NOW (16ML)

10 BUSTINE


1 CARD CON QR CODE
PER SCARICARE L'APPOSITA APP

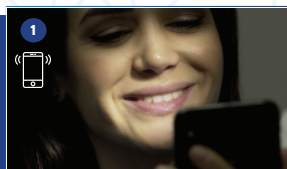


Prima di effettuare il trattamento valutare la tonalità di colore dei denti tramite l'utilizzo dell'app.



Rimuovere il tappo della penna e ruotare fino a quando il gel blu si espanderà tra le setole.

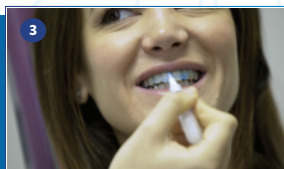

Applicare il gel sulla superficie dei denti.

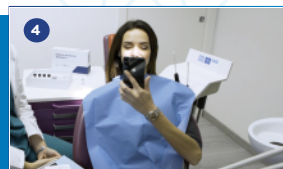

Al termine del trattamento valutare i risultati ottenuti utilizzando l'app "White Beauty Professional".

MEDICAL WHITENING TREATMENT

**White Beauty Professional
MEDICAL WHITENING TREATMENT**
è lo sbiancamento professionale che contiene
il necessario per effettuare 4 trattamenti.

La confezione contiene i barattolini monodose di polvere di silica e le fiale monodose di liquido (perossido di idrogeno al 38%) da miscelare per la realizzazione del gel sbiancante e una siringa di **QUICK MASK BLUE**, la diga liquida fotopolimerizzabile che verrà utilizzata per la protezione delle gengive durante il trattamento.


Il trattamento sbiancante è corredato anche dalla **CARD White Beauty Professional**, che grazie alla scala colori renderà possibile una valutazione oggettiva dei risultati ottenuti, mentre le certificazioni adesive riporteranno i dati del trattamento effettuato.

Cod. EE641/W - Contenuto del kit:

- 4 fiale di LIQUID (monodose)
- 4 barattolini di POWDER (monodose)
- 4 spatole + 1 cono dosatore
- 1 siringa da 3,5g di QUICK MASK BLUE + 4 aghi applicatori
- 4 White Beauty Professional CARD + 4 certificazioni adesive
- 1 card con QR code per scaricare l'apposita App



CE 0476

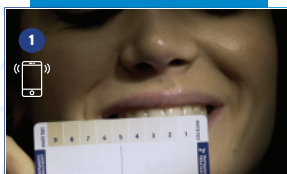

1 Effettuare l'anamnesi del paziente e effettuare la presa colore con la card oppure con l'app.



2 Inserire l'apribocca e applicare la diga gengivale fotopolimerizzabile Quick Mask Blue.



3 Applicare il cono dosatore sul flacone di liquido e versare il contenuto nel barattolo di polvere.



4 Mescolare il tutto fino ad ottenere un gel omogeneo e per una maggiore comodità applicare il vasetto al guanto.




5 Applicare il gel sbiancante sull'area da trattare.



6 Attivare la procedura di sbiancamento usando Easy Lamp o Easy Lamp Plus.



7 Aspirare e rimuovere il gel sbiancante.

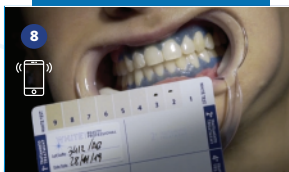

8 Effettuare la presa colore con la card oppure con l'app per verificare i risultati ottenuti.



9 Rimuovere la diga gengivale.



Le lampade **White Beauty Professional EASY LAMP**, disponibili in due diversi modelli e studiate per l'utilizzo degli sbiancanti professionali White Beauty Professional, garantiscono il massimo delle prestazioni in assoluta sicurezza e con il massimo comfort per il paziente.

La dimensione e la curvatura della testa della lampada permette la diffusione di un fascio di luce fredda e potente per sbiancare 16 o più denti in una sola seduta e con un assoluto comfort per il paziente.

White Beauty Professional
EASY LAMP - Cod. EE605
EASY LAMP PLUS - Cod. EE605/PLUS

In caso di sensibilità dentinale si consiglia l'applicazione preventiva di un trattamento desensibilizzante che può essere ripetuto anche al termine del trattamento.

TRATTAMENTO DOMICILIARE

BLUE LED HOME TREATMENT



White Beauty Professional BLUE LED HOME TREATMENT è il trattamento domiciliare pensato per i pazienti che vogliono mantenere a casa la tonalità del dente ottenuta dopo aver effettuato lo sbiancamento professionale in studio.

Il kit include tutti gli strumenti necessari al paziente per effettuare il trattamento sbiancante con la penna sbiancante a base di perossido di idrogeno al 6% da utilizzare in combinazione con il bite sbiancante MASK LED.

Nel pratico kit sono compresi anche gli strumenti di igiene orale (collutorio, dentifricio e spazzolino White Now) che possono essere portati sempre con sé nella pratica pochette.

Cod. EE644 - Contenuto del kit:

2 PEN WHITE BEAUTY
PROFESSIONAL (2ML)

1 SPAZZOLINO WHITE NOW
CARBON CORRECT

1 COLLUTORIO WHITE NOW
(50ML)

1 WHITE BEAUTY
PROFESSIONAL MASK LED + 1 BOX

1 DENTIFRICIO WHITE
NOW GOLD (50ML)

1 POCLETTE



1
Applicare White Beauty Professional PEN sulla superficie dei denti.



2
Preparare White Beauty Professional MASK LED e collegarlo allo smartphone o al computer per alimentarlo.



3
Inserire tra i denti il bite e procedere con l'accensione. Al termine del trattamento pulire e riporre il MASK LED nell'apposito box.

WHITE | BEAUTY
PROFESSIONAL

STRUMENTI PER LO STUDIO



TARGA

Targa in plexiglass per lo studio (misure: 28 x 15 cm)

Cod. EE672 - Conf. singola



LEAFLET E PORTALEAFLET

Portaleaflet per la sala d'aspetto con leaflet informativi per il paziente

Cod. EE671 - Portaleaflet + 25 leaflet - Conf. singola

Cod. EE671/LEAFLET - Leaflet ricarica per expo - Conf. da 25 pz



POSTER

Poster per lo studio disponibili in 2 versioni

Cod. EE670/A - Poster versione azzurra - Conf. singola

Cod. EE670/B - Poster versione bianca - Conf. singola



PHOTOBOOT - BACKDROP

Fondale per photoboot


Cod. EE674 - Conf. singola



LASER ACTIVATOR (Accessorio)

Liquido di color blu-viola che, grazie a speciali componenti tecnologici, permette la colorazione dei gel sbiancanti per l'utilizzo con i laser

Cod. EE610 - Conf. da 1 flacone da 7ml

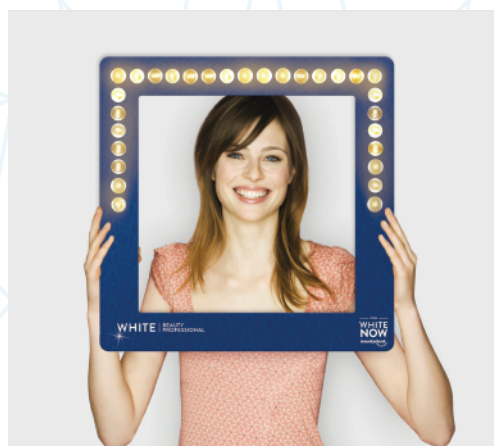

PHOTOBOOT - CORNICE

Cornice per photoboot

Cod. EE673 - Conf. singola

IL COLORE BLU NELLO SBIANCAMENTO

Il colore dei nostri denti è il risultato dell'influenza reciproca di molti fattori e nasce dall'interazione dello smalto e della dentina con la luce durante i processi di riflessione e rifrazione delle onde luminose. A livello dello smalto predominano le onde più corte vicine al bianco e al blu, mentre a livello della dentina prevalgono le onde lunghe proprie del giallo e arancio. Sommando le lunghezze d'onda proprie di queste due strutture, smalto e dentina, ovvero il blu ed il giallo, il colore finale sarà proprio il bianco.

Seguendo questo razionale, appare logico come per aumentare il valore (luminosità) degli elementi dentari si possa aggiungere un cromogeno blu alla superficie per ottenere una tinta finale più vicina al bianco.

Per fare ciò è stata scelta la molecola del Blue Covarine, un pigmento che forma un sottile film blu legandosi in modo reversibile al dente e donandogli subito un colore più bianco.

Il Blue Covarine va a depositarsi uniformemente sulle superfici dentarie rivestite dalla pellicola acquisita, portando ad un cambio del colore che in ultima analisi induce un aumento della misurazione e percezione del bianco dei denti.



WHITE BEAUTY PROFESSIONAL: L'APPLICAZIONE!

Il sistema di sbiancamento professionale, White Beauty Professional, prevede un'applicazione dedicata che permette l'interazione tra professionista e paziente e il monitoraggio dell'intero sistema di sbiancamento.

L'applicazione, disponibile su Apple Store o Android Market, è scaricabile tramite l'apposito QR code inserito all'interno dei kit. Dalla prima seduta di igiene orale, il professionista dopo aver memorizzato lo studio, può coinvolgere il paziente registrandolo sull'applicazione dedicata inserendo i dati dello stesso e l'indirizzo mail. L'applicazione permette di memorizzare il colore iniziale del dente attraverso lo scatto di una fotografia con la maschera di matching e di monitorare i progressi successivi dello stesso, a casa o in studio, fino alla fine del trattamento. In questo modo si possono monitorare tutti i risultati ottenuti. Il professionista può inoltre inserire delle note e salvarle nella scheda del trattamento.

L'applicazione è stata creata con due principali livelli d'utenza: il paziente può interagire direttamente con lo studio per "Richiedere un appuntamento" e il professionista può inviare un "Promemoria" al proprio paziente per una semplice visita di controllo e, se necessario, ripetere lo sbiancamento professionale.

Nell'applicazione è presente un sistema di credito a punti per il professionista, attraverso il quale può ottenere punti che vengono utilizzati nel sistema di e-commerce. L'applicazione comprende anche una sezione "News" dove il professionista può leggere informazioni importanti e una sezione "Promo" dei prodotti. Tutti i pazienti associati allo studio possono in questo modo connettersi con il proprio centro, collezionare le foto dei loro progressi e condividerle sui social per ottenere premi!



CORSI PROFESSIONALI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE DI NUOVA GENERAZIONE

Strumenti e sistemi per il team odontoiatrico

OBIETTIVO DEL CORSO

L'obiettivo del corso è quello di andare oltre le finalità e gli scopi di un semplice corso sullo sbiancamento, offrendo e fornendo al Team Odontoiatrico una serie di strumenti, prodotti e sistemi che possano integrarsi al meglio con le principali attività terapeutiche da mettere a disposizione del Paziente.

PROGRAMMA DEL CORSO

- Strumenti e sistemi a disposizione del Team Odontoiatrico
- L'importanza di una corretta e predicibile rilevazione del colore prima e dopo il trattamento
- Revisione bibliografica
- Chimica dello sbiancamento
- Normative di legge sui Dispositivi Medici
- Colorazioni
- Studi recenti e casi clinici
- Nuove opportunità di business per il team odontoiatrico
- Nuove forme di comunicazione al paziente indiretto
- Strumenti di marketing
- Informazioni sul comportamento alimentare
- Protocollo clinico (sequenza di immagini e filmati)
- Domande e risposte
- Conclusione lavori

DEMO GRATUITA

**PRENOTA SUBITO
UNA DIMOSTRAZIONE
GRATUITA NEL TUO STUDIO
E CON UN TUO PAZIENTE!**

E' possibile prenotare una dimostrazione gratuita del sistema sbiancante White Beauty Professional: un nostro incaricato verrà presso il tuo studio per effettuare un trattamento sbiancante con un tuo paziente e mostrarti il sistema sbiancante White Beauty Professional.

**PRENOTA LA TUA
DIMOSTRAZIONE SU:
MIROMED.IT/DEMO-WHITE**

MIROMED

MIROMED srl Via Lecco 3 - 20020 Lainate (MI)

Tel: +39 02 93572150 - Fax: +39 02 9357510

www.miromed.it - www.miromedshop.it - info@miromed.it

Concessionario esclusivo di zona: